

マグナキャプス®のウイルスに対する不活化効果試験

—試験報告書—

試験番号:15100630

株式会社 食環境衛生研究所

〒379-2107

群馬県前橋市荒口町 561-21

Tel027-230-3411

Fax027-230-3412

1. 表題

マグナキャプス®のウイルスに対する不活化効果試験

2. 試験番号

No.151000630

3. 目的

資材とネコカリシウイルスを反応させた時のウイルス不活化効果を確認するために実施した。

4. 試験管理組織

試験依頼者の名称、所在地及び担当者氏名

名称 朝田ケミカル株式会社

所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-4-1

新国際ビル 628 (株式会社朝田商会 内)

氏名 真田 宏和 様

実施機関の名称、所在地及びその長の氏名

名称 株式会社 食環境衛生研究所

所在地 〒379-2107 群馬県前橋市荒口町 561-21

氏名 代表取締役 久保 一弘

試験実施責任者の氏名

松本 彰平

試験担当者の氏名

近藤 実紀

5. 試験スケジュール

試験受託日 2015年10月6日

試験開始日 2015年10月13日

試験終了日 2012年11月5日

6. 試験資材

Mgnakcaps®(マグナキャプス®) Mineral Wash

(Calcined Shell Powder)

用法用量:Mgakcaps 2gに 精製水 1Lを懸濁(pH12.5以上)

7. 供試微生物

ネコカリシウイルス:feline calicivirus F9 株

培養細胞:CRFK 細胞(ネコ腎臓由来株化細胞)

8. 区の設定

区	処置	感作時間
試験区	試験資材 1mL にウイルス液 0.1mL 添加	試験開始後 0 分、5 分
対照区	リン酸緩衝液 1mL にウイルス液 0.1mL 添加	試験開始後 0 分、5 分

9. 試験方法

「ウイルス実験学 総論 改訂二版 丸善株式会社 ウイルス中和試験法」を参考として実施した。

10. 試験手順

①予備試験:

試験に先立って、試験資材が培養細胞に与える影響(細胞毒性)を調査した。

試験資材をリン酸緩衝液で 10 倍段階希釈した後、培養細胞に接種し、培養後の細胞の正常な状態を示す最高濃度を確認し、試験に使用するウイルス濃度を決定した。

その結果、細胞毒性について、CRFK 細胞では試験資材を 10 倍まで希釈しても細胞の発育不良が確認された。このため、試験に際しては、ネコカリシウイルスは 10 倍以上の希釈をもって実施する必要があることが判明した。この為、両ウイルス添加濃度は 10^7 TCID₅₀/0.1mL 以上とした。

②本試験・試験液混合:

試験区分に従い、試験資材及びリン酸緩衝液の各 1mL をそれぞれ分取し、予備試験で決定した濃度にウイルス液を添加した。

ウイルス液添加後、混合液として室温(25℃)にて所定の時間静置した。

③本試験・細胞接種及び菌数測定:

試験区分ごとに感作が終了した混合液をそれぞれ 10 倍段階希釈し、96well プレートに培養した細胞に 100μL ずつ接種した。

判定は、37℃、炭酸ガス培養(5%)で 5 日間培養した後、培養細胞を顕微鏡観察し、培養細胞に現れる CPE(細胞変性)をもってウイルス増殖の有無を確認し、その濃度を算出した。

11. 結果

ネコカリシウイルスに対する試験結果を表1及び図1に示した。

試験に使用したウイルス濃度は 10^{11} TCID₅₀/0.1mL であった。


対照区では試験開始後から、試験開始後5分までの間にウイルス量の変化は見られなかった ($10^{10.5}$ TCID₅₀/0.1mL)。

試験区では開始後5分で $10^{1.7}$ TCID₅₀/0.1mL (99.99999%以上減少)となった。

表.1 ネコカリシウイルス試験結果(TCID₅₀/0.1mL)

区	試験開始時	開始後5分
対照区	$10^{10.5}$ (32000000000)	$10^{10.5}$ (32000000000)
試験区	10^{11} (320000000000)	$10^{1.7}$ (50)

試験使用ウイルス濃度: 10^{11} TCID₅₀/0.1mL

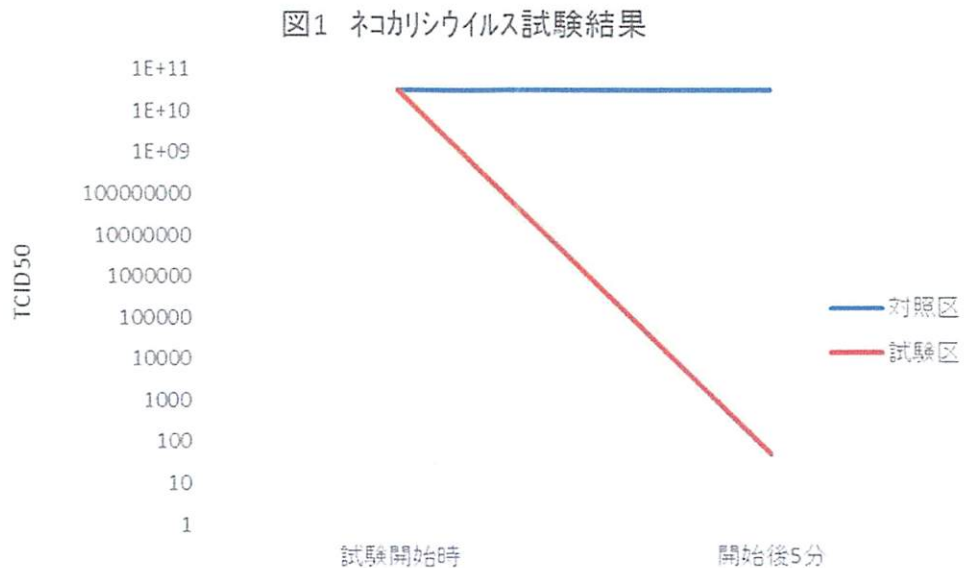

12. 考察

今回、マグナキャプス®のネコカリシウイルスに対する不活化効果試験を実施した。

その結果、ネコカリシウイルスに対しては 5 分以上反応することで 99.99999%以上不活化効果があることが判明した。

以上の結果から、マグナキャプス®はネコカリシウイルスに有効的に不活化効果が確認された。

試験責任者名 松本彰斗 